

**ITS.**  
Implants for Trauma Surgery

# CALCANEUS SOLUTIONS




Made in **Austria**

# ORDNUNGSGEMÄSSE REPOSITION

# STABILE FIXIERUNG

## ○ Calcaneus Distractor & Heel Press

- Minimalinvasive Frakturreposition
- Distraction ist stufenlos einstellbar
- Der Distraktor hält die Reposition und erlaubt eine finale Fixierung mit Platten und/oder Schrauben

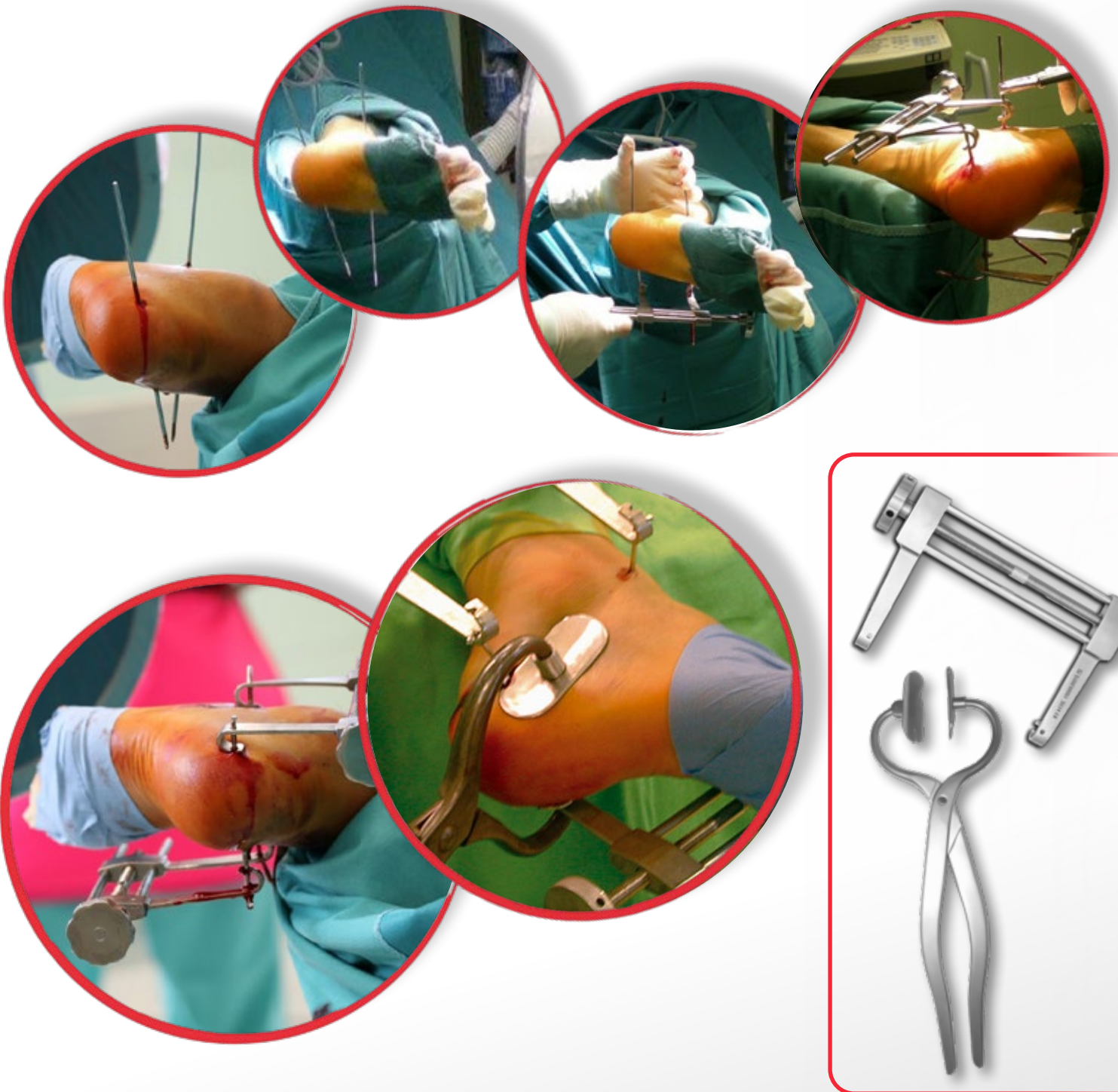

# ○ Drei Optionen für die Fixierung

## Anterolateral Calcaneus Locking Plate



## CALmi

- Für minimalinvasiven Zugang bei komplexen Calcaneusfrakturen
- 4 Plattenvarianten für den linken und rechten Calcaneus
- Lange Plattenvariante mit zusätzlichem Ausläufer in Richtung Tuber calcanei (klein und groß)
- Multiple Fixationsmöglichkeiten zur subchondralen Abstützung der anterioren, mittleren und posterioren Gelenksflächen
- Multidirektionale Winkelstabilität
- Führungsdrahtlöcher zur temporären Fixation
- Platten können in-situ an die jeweilige individuelle Anatomie angepasst werden

## CAL

- Multidirektionale Winkelstabilität
- Kurze und lange Version
- Platten können in-situ an die jeweilige individuelle Anatomie angepasst werden

## Calcaneus Locking Plates




## Cannulated Recon Cancellous Screw



## CRCS

- D=7.5mm kanülierte Vollgewindeschraube mit 5° konischem Kopf
- Selbstbohrend und selbstschneidend
- Rückschneidende Flanken, um die Explantation zu erleichtern
- Konstante Gewindesteigung für die optimale Verwendung als Stellschraube
- Kraftvolles T25 Torque Profil

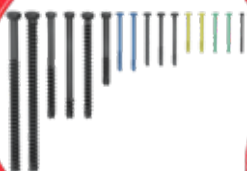

Komplettes Sortiment an kanülierten Schrauben und Schrauben ohne Kopf zur Kompression erhältlich.

## Haftungsausschluss:

Die Benutzung beschränkt sich auf medizinisches Personal mit entsprechender Produktschulung durch medizinische Produktberater oder Kenntnis des anzuwendenden chirurgischen Verfahrens. Das medizinische Personal muss sicherstellen, dass die Verwendung unserer Medizinprodukte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands und der Krankengeschichte des Patienten angewendet wird. Vor der Verwendung des Produkts muss sich das medizinische Personal auf die vollständigen Informationen auf dem Produktetikett und der Gebrauchsanweisung beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und vorbeugende Maßnahmen sowie Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation. Die Produktverfügbarkeit hängt von Registrierung und Freigabe des jeweiligen Landes ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.its-implant.com](http://www.its-implant.com) oder unter [office@its-implant.com](mailto:office@its-implant.com). Alle hierin enthaltenen Informationen sind geistiges Eigentum der I.T.S. GmbH.



### HEADQUARTER

I.T.S. GmbH  
Autal 28, 8301 Lassnitzhöhe, Austria  
Tel.: +43 (0) 316/ 211 21 0  
[office@its-implant.com](mailto:office@its-implant.com)  
[www.its-implant.com](http://www.its-implant.com)

I.T.S. Deutschland GmbH  
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt  
Tel.: +49 69 25 73 75 322  
[germany@its-implant.com](mailto:germany@its-implant.com)  
[www.its-implant.com](http://www.its-implant.com)

CE 0297

Best. Nr. CALCANEUSSOL-BIC-0326-DE  
Edition: März/2026

**ITS.**  
Implants for Trauma Surgery



[www.its-implant.com](http://www.its-implant.com)



ITS. GmbH



ITS. Implants



[its.implants](https://www.instagram.com/its.implants)

© I.T.S.GmbH Graz/Austria 2026  
Irrtümer, Druckfehler und technische  
Änderungen vorbehalten.