


WRIST SOLUTIONS



Made in Austria

VERSATILE SOLUTION

Das ITS. Plattenportfolio bietet effektive Instrumente zur Wiederherstellung der distalen Gelenklinie des Handgelenks bei Frakturen des Radius und/oder der Ulna.

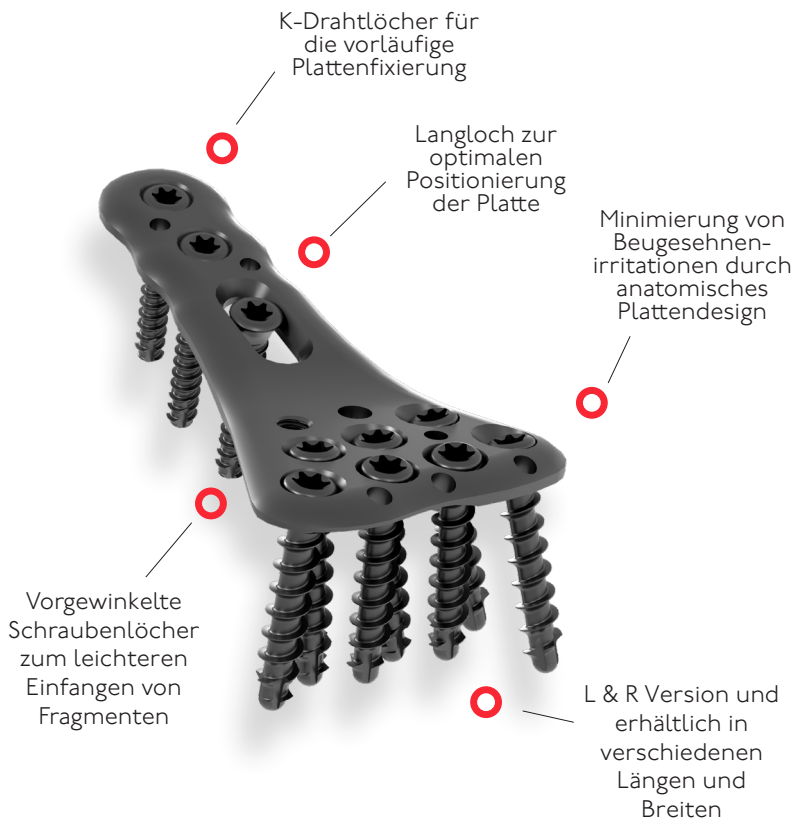

PROlock Radius Locking Plate 2

Die PROlock Radius Locking Plate II ist der fortschrittliche Nachfolger der früheren ITS. Radiusplatten. Sie verfügt über ein konisches **WATERSHED-LINE-DESIGN** für die distale Platzierung bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos von Sehnenreizungen.


Das PRL 2 System bietet, entsprechend den Technologieprinzipien der ITS. Platten, polyaxiale Verriegelung in allen Schraubenlöchern (außer Langloch). Vorgewinkelte distale Schraubenlöcher erleichtern das Einsetzen und erhöhen die Reichweite, z. B. in das Styloid. Ein optionaler röntgendurchlässiger Bohrblock ermöglicht zudem eine präzise und schnelle Platzierung der Schrauben in distalen Plattenlöchern mit voreingestellten Winkeln.

NEW

PROlock Radius Locking Plate PHOENIX

Mit der PRL Phoenix wurde das PRL 2 System um eine Option zur besseren Abstützung des radialen Styloids erweitert.

Dieses **STYLOID-DESIGN** verfügt auch über ein Repositionsfenster, das die weitere Manipulation von Fragmenten durch die Platte erleichtert, sowie über ein zusätzliches Schraubenloch im proximalen Bereich der Platte.

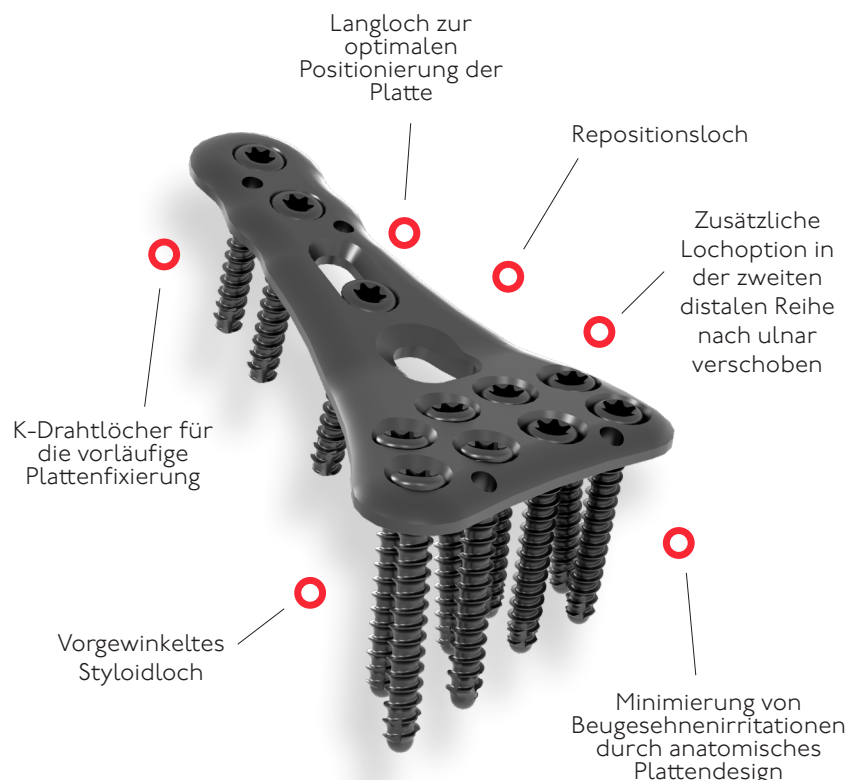

ON FOR THE WRIST



Distal Ulna Locking Plate

Die Distale Ulna Locking Plate ist ein Plattensystem mit anpassbaren Verriegelungsschrauben für die distale Ulnakontur. Ihr anatomisches Design gewährleistet eine Schraubenplatzierung zur vollständigen Unterstützung des Ulnakopfes.

Durch die palmare Lage wird die Platte von der Muskulatur abgedeckt, sodass eine Metallentfernung nicht immer notwendig ist.

Ulna Osteotomy Locking Plate 2

Die Ulna Osteotomy Locking Plate ermöglicht bei Bedarf eine Korrektur der Ulna-Position um bis zu 8 mm in einem Schritt (oder 16 mm in zwei). Dieses Hybridsystem mit Verriegelungs- und Kompressionschrauben ist speziell auf die anatomischen und biomechanischen Anforderungen nach einer Verkürzungsosteotomie der distalen Ulna abgestimmt.

Es bietet eine All-in-One-Lösung mit einem einzigartigen planparallelen Querschnitt für einen rotationsstabilen Verkürzungsprozess und optionaler Kompression.



Haftungsausschluss:

Die Benutzung beschränkt sich auf medizinisches Personal mit entsprechender Produktschulung durch medizinische Produktberater oder Kenntnis des anzuwendenden chirurgischen Verfahrens. Das medizinische Personal muss sicherstellen, dass die Verwendung unserer Medizinprodukte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands und der Krankengeschichte des Patienten angewendet wird. Vor der Verwendung des Produkts muss sich das medizinische Personal auf die vollständigen Informationen auf dem Produktetikett und der Gebrauchsanweisung beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und vorbeugende Maßnahmen sowie Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation. Die Produktverfügbarkeit hängt von Registrierung und Freigabe des jeweiligen Landes ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.its-implant.com oder unter office@its-implant.com. Alle hierin enthaltenen Informationen sind geistiges Eigentum der I.T.S. GmbH.



HEADQUARTER

I.T.S. GmbH

Autal 28, 8301 Lassnitzhöhe, Austria

Tel.: +43 (0) 316/ 211 21 0

office@its-implant.com

www.its-implant.com

I.T.S. Deutschland GmbH

Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt

Tel.: +49 69 25 73 75 322

germany@its-implant.com

www.its-implant.com



Best. Nr. WRIST-BIC-0224-DE

Edition: Februar/2024

ITS.
Implants for Trauma Surgery



www.its-implant.com



ITS. GmbH



ITS. Implants



[its.implants](https://www.instagram.com/its.implants)

© I.T.S. GmbH Graz/Austria 2024
Irrtümer, Druckfehler und technische
Änderungen vorbehalten.