

CLAVICLE SOLUTIONS



Made in Austria

VIELSEITIGE LÖSUNG FÜR

Das **ITS. Clavicula Locking Plates System** ist ein bewährtes Osteosynthesesystem für verschiedene Frakturen der Clavicula. Mit dieser Technologie kann eine anatomische Reposition erreicht und bis zur Heilung fixiert werden. Die kurze Ruhigstellungszeit gewährleistet eine schnelle Rehabilitation und frühe Funktionalität.

Alle Platten sind anatomisch vorgeformt, können aber intraoperativ angepasst werden, um die beste anatomische Passform für jeden einzelnen Patienten zu erreichen.



○ Anterior Clavicle Plates



- Versetzte & vorgewinkelte Plattenlöcher zur optimalen Fixation im flachen lateralen Bereich
- Die 10-Loch- und lateralen Varianten sind an die laterale Clavicula angepasst

- Multidirektionale Winkelstabilität
- Anatomisches Plattendesign
- Recon Design vereinfacht individuelles Anformen
- Gleitloch mit Kompressionsmöglichkeit von bis zu 7mm
- Abgeflachte Plattenenden & -kanten minimieren Weichteilirritationen



○ Superior Clavicle Plates **LATERAL**



- Multidirektionale Winkelstabilität
- Anatomisches Plattendesign
- L & R Version / Längen: 4 & 6-Loch
- Breites Seitenteil zur Aufnahme mehrerer Schrauben
- Spitzes mediales Plattenende für perkutane Insertion (lange Platte)



- Lateral 25% schmaler
- Recon Design vereinfacht individuelles Anformen
- Kleinere Löcher im lateralen Ende ermöglichen eine größere Anzahl an Schrauben
- Längen: 6, 8, 10-Loch



R CLAVICULA FRAKTUREN

○ Superior Clavicle Plate **MEDIAL**

- Multidirektionale Winkelstabilität
- Anatomisches Plattendesign
- Durch 180° Drehung Ausführung für links und rechts
- Überbrückender Mittelteil für zusätzliche Festigkeit, der die Bruchstelle abdeckt
- Längen: 6, 8, 10-Loch Optional: 12-Loch

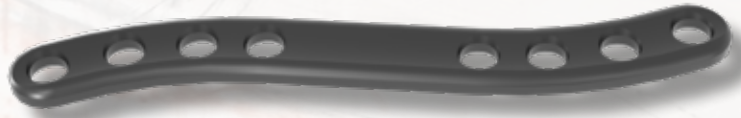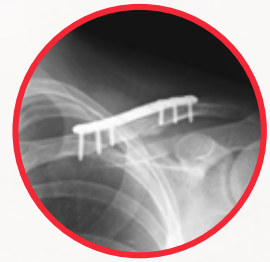

○ Clavicle Hook Plate

Das neue Clavicle Hook Locking Plate System (CHLP) bietet eine zuverlässige Fixierung von Frakturen der lateralen Clavicula und Verletzungen des Akromioklavikulargelenks.



- Multidirektionale Winkelstabilität
- Anatomisches Plattendesign
- Langloch für bis zu 3.5mm Kompression
- Erhöhter Hakenquerschnitt für maximale Festigkeit
- Hakenwinkel und -position angepasst für optimalen Sitz unter dem Akromion
- Anatomisch gebogener Schaft zur Anpassung an die Form der distalen Clavicula
- Platte mit niedrigem Profil und abgerundeten Kanten für ein geringes Risiko von Weichteilirritationen
- Sanfte Verschmälung der Platte von distal bis zum Schaft, die die Platzierung von vier distalen Schrauben ermöglicht



Die Platte ist in 5-, 7- und 9-Loch-Ausführung erhältlich, auf Anfrage auch mit 6- und 8-Loch. Außerdem werden drei Hakentiefen von 12mm, 16mm und 20mm angeboten.

12mm — ○
16mm — ○
20mm — ○



Entsprechend den Technologieprinzipien aller ITS. Platten bietet dieses System die Möglichkeit der polyaxialen Verriegelung in allen Schraubenlöchern (ausgenommen Langloch). Die freie Wahl der Schraubenplatzierung gibt dem Chirurgen die Möglichkeit, den besten Schraubentyp und -winkel zu wählen, was eine optimale Positionierung des Humeruskopfes und eine maximale Abstützung auch bei schlechter Knochenqualität, ermöglicht.

Haftungsausschluss:

Die Benutzung beschränkt sich auf medizinisches Personal mit entsprechender Produktschulung durch medizinische Produktberater oder Kenntnis des anzuwendenden chirurgischen Verfahrens. Das medizinische Personal muss sicherstellen, dass die Verwendung unserer Medizinprodukte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands und der Krankengeschichte des Patienten angewendet wird. Vor der Verwendung des Produkts muss sich das medizinische Personal auf die vollständigen Informationen auf dem Produktetikett und der Gebrauchsanweisung beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und vorbeugende Maßnahmen sowie Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation. Die Produktverfügbarkeit hängt von Registrierung und Freigabe des jeweiligen Landes ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.its-implant.com oder unter office@its-implant.com. Alle hierin enthaltenen Informationen sind geistiges Eigentum der I.T.S. GmbH.



HEADQUARTER

I.T.S. GmbH

Autal 28, 8301 Lassnitzhöhe, Austria

Tel.: +43 (0) 316/ 211 21 0

office@its-implant.com

www.its-implant.com

I.T.S. Deutschland GmbH

Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt

Tel.: +49 69 25 73 75 322

germany@its-implant.com

www.its-implant.com



Best. Nr. CLS-BIC-I224-DE

Edition: Dezember/2024

ITS.
Implants for Trauma Surgery



www.its-implant.com



ITS. GmbH



ITS. Implants



[its.implants](https://www.instagram.com/its.implants)

© I.T.S.GmbH Graz/Austria 2024
Irrtümer, Druckfehler und technische
Änderungen vorbehalten.